




MedLED Chrome

Skutečně bezdrátová čelová svítidla

Truly Cordless™

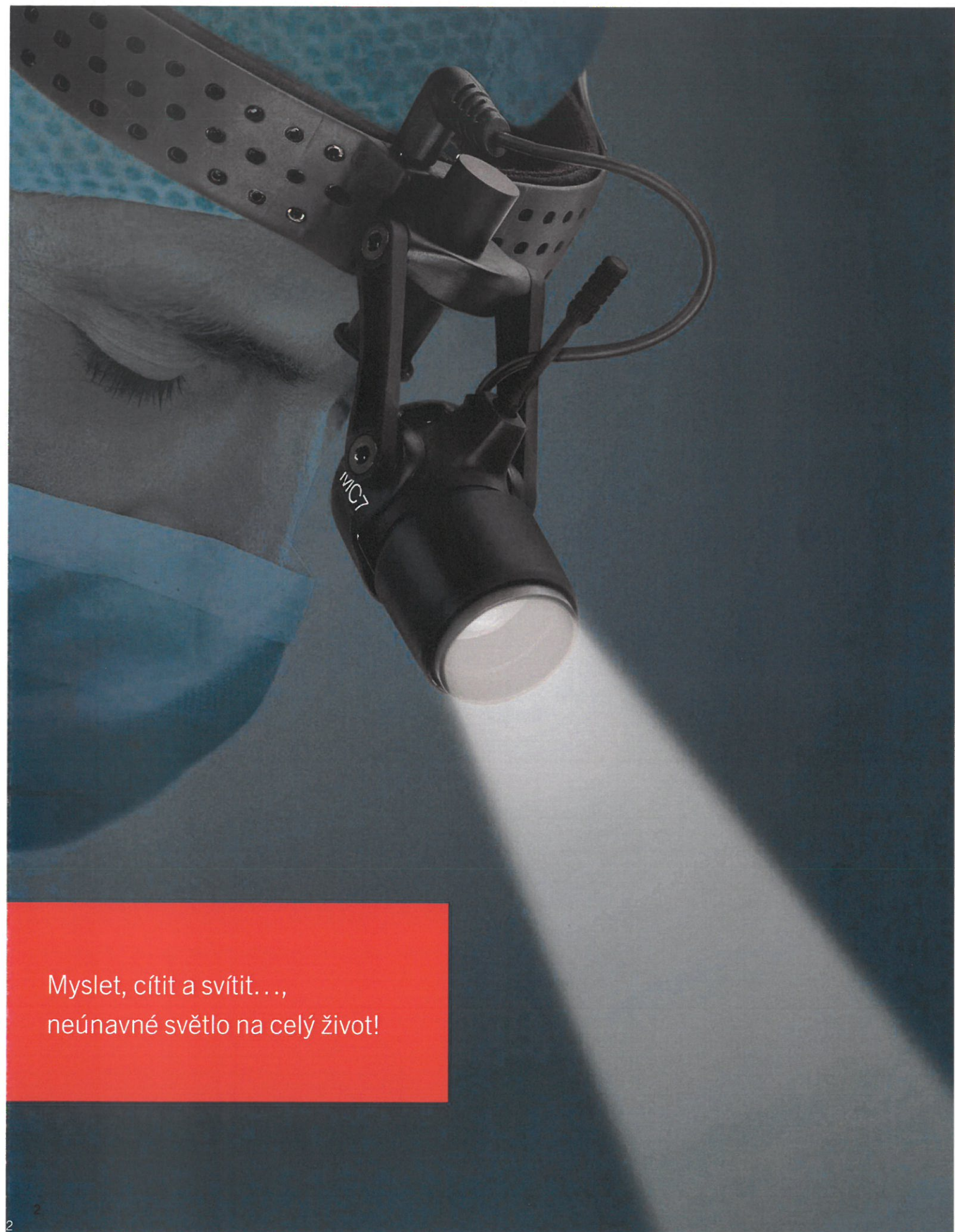

Myslet, cítit a svítit...,
neúnavné světlo na celý život!

MedLED Chrome

čelová svítidla

Svoboda bez kompromisů

Čelová svítidla MedLED Chrome díky nejmodernější technologii dosahují toho, co bylo dříve nemyslitelné. Svítidlo, které osvětlí jakékoli pracovní pole chirurga, a to jak z pohledu intenzity, tak velikosti osvětlené plochy. Tiše, pohodlně a bezdrátově.

Vlastnosti

- Intenzita osvětlení:
 - MC3 – 100 000 lux
 - MC6 – 200 000 lux
 - MC7 PRO – 275 000 lux – nyní ještě jasnější
- Doba provozu na akumulátory:
 - MC3 – 7,75 hod.
 - MC6 – 6,75 hod.
 - MC7 PRO – 3,5 hod.
- Hmotnost (včetně akumulátorů):
 - MC3 – 335 g
 - MC6 – 335 g
 - MC7 PRO – 350 g
- Doba provozu na akumulátory: viz výše, je závislá na konkrétním modelu, avšak prakticky neomezená díky nabíječce se čtyřmi nabíjecími pozicemi.
- Doba nabíjení přes USB: 6,5 hodiny.
- Doba nabíjení v nabíjecí stanici se čtyřmi pozicemi: 10 hodin; současné nabíjení až dvou sad akumulátorů.
- Nastavení: plně nastavitelný úhel paprsku, stejně tak jako otáčení doprava a doleva, rozšířená možnost nastavení průměru osvětleného pole.
- Kvalita osvětleného pole: ostře ohraničené kruhové pole homogenního světla.


MedLED Chrome

Svoboda bez kompromisů

Hledáte-li výkonné, bezdrátové a pohodlné čelové svídlo s dlouhou životností, najdete u KLS Martin kompletní řadu svítidel s bohatým příslušenstvím.



Intenzita a jas

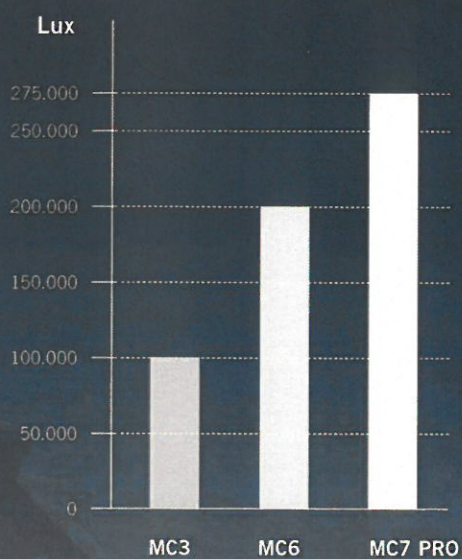

200 mm
MC7 PRO

Maximální průměr osvětleného pole
měřítko 1:1

100 mm
MC3


90 mm
MC6

MedLED Chrome

Vše přímo na hlavě

To je náš hlavní cíl. Žádné kabely a žádná omezení. Žádné světlovodné kabely ani jednotky na opasek, ale skutečně bezdrátový provoz. Světlo bez kompromisů!


Žádné ohrožení sterility a vše situováno bezpečně nad úrovní krku.

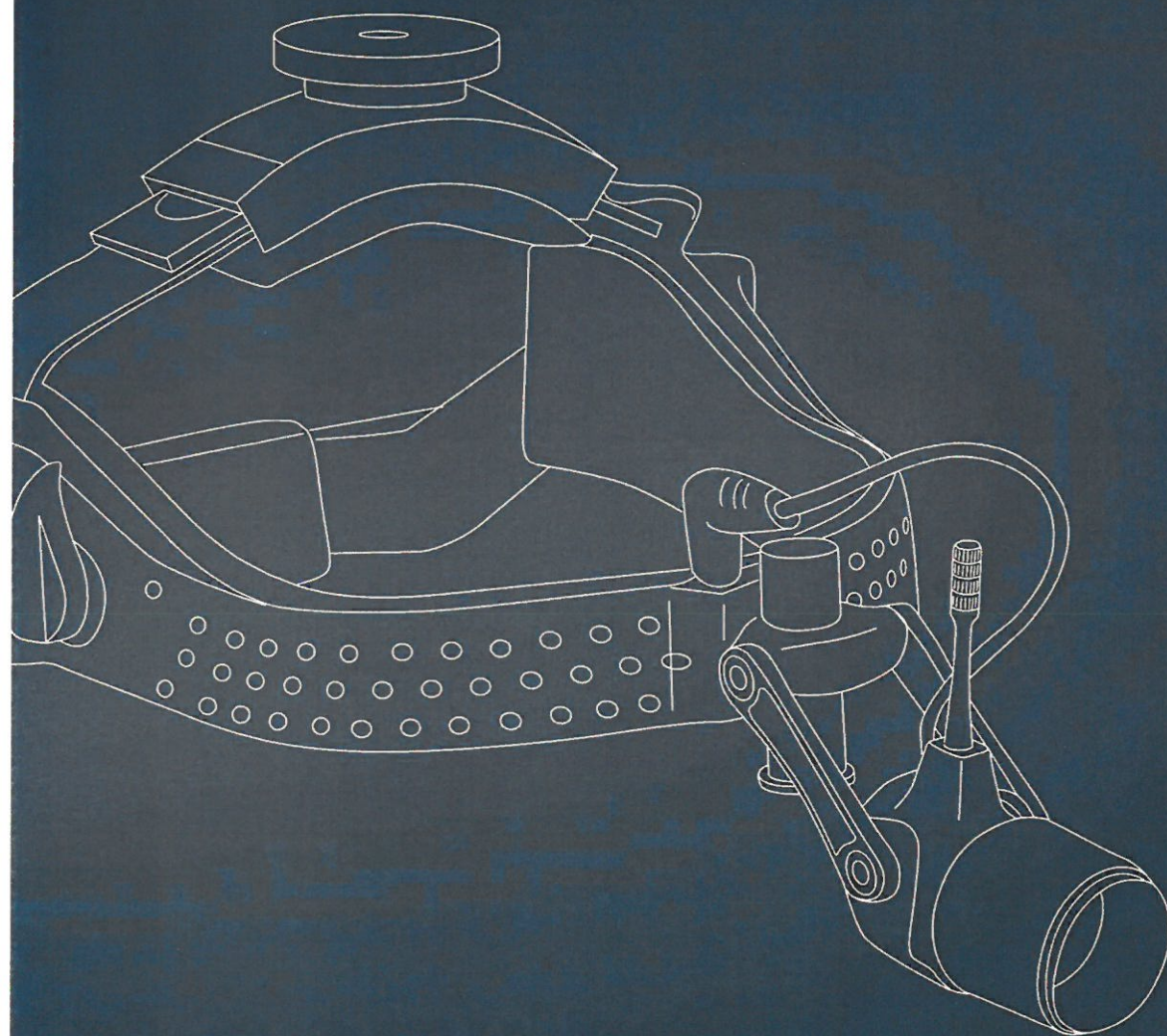


Quiet-Cool™

Chladné a tiché bez jakéhokoli rizika nadměrného zahřívání. Pomocí patentované technologie se LED okamžitě chladí. Konstrukce korpusu je navržena tak, aby sama odváděla veškeré zbytkové teplo. Aktivní ventilátorové chladiče vyžadují více energie, kterou je možno dodat pouze z větších akumulátorů umístěných na opasku uživatele. To je u nás minulost!


Možnosti nastavení průměru osvětleného pole

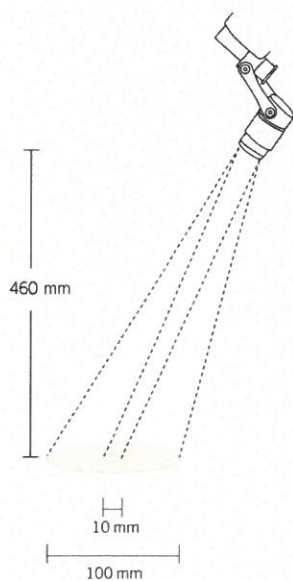

MC3

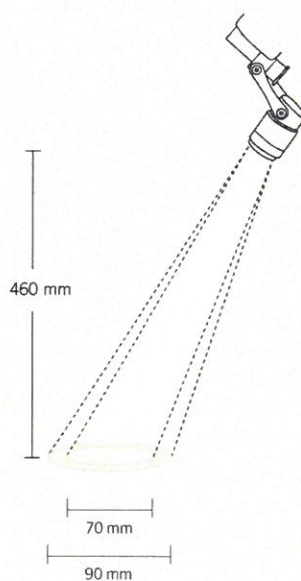


MC6

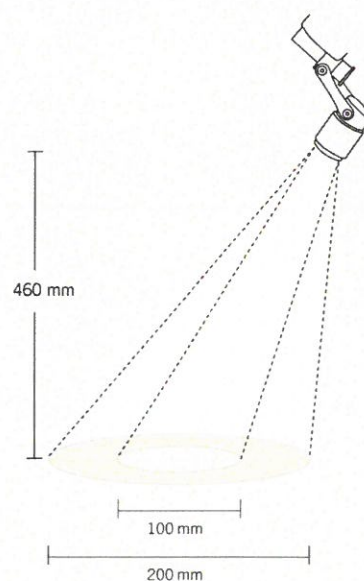

MC7 PRO

MedLED Chrome

čelová svítidla – Připravena k použití!

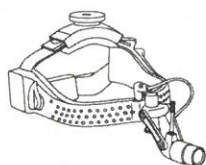


MedLED Chrome MC3

Katalogové číslo

Čelové svítidlo MedLED Chrome MC3 (Hardtop), transportní kufr, USB nabíjecí kabel, síťový adaptér EU, US, UK, AU a dva akumulátory (Li-Pol).

17-500-40-04

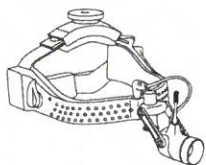


MedLED Chrome MC6

Katalogové číslo

Čelové svítidlo MedLED Chrome MC6 (Hardtop), transportní kufr, USB nabíjecí kabel, síťový adaptér EU, US, UK, AU a dva akumulátory (Li-Pol).

17-500-50-04

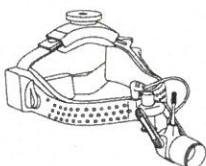

MedLED Chrome MC7 PRO

Katalogové číslo

Čelové svítidlo MedLED Chrome MC7 PRO (Hardtop), transportní kufr, USB nabíjecí kabel, síťový adaptér EU, US, UK, AU a dva akumulátory (Li-Pol).

17-500-60-04



MedLED Chrome MC3/6/7 PRO

Katalogové číslo

Čelová svítidla MedLED Chrome MC3, MC6, MC7 PRO (Hardtop), transportní kufr, USB nabíjecí kabel, síťový adaptér EU, US, UK, AU a dva akumulátory (Li-Pol).

17-500-70-04

MedLED Chrome

příslušenství

Lupové brýle MC3

Zvětšení



Dioptrie	Zvětšení	Zlepšení zraku	Optický výkon	Doporučený pracovní odstup (ohnisková vzdálenost)	Katalogové číslo
+2	+ 0,40	40 %	1,4 x	250 mm	17-500-12-04
+3	+ 0,60	60 %	1,6 x	220 mm	17-500-13-04
+4	+ 0,80	80 %	1,8 x	200 mm	17-500-14-04

Lupové brýle MC6 / MC7 PRO

Zvětšení




Dioptrie	Zvětšení	Zlepšení zraku	Optický výkon	Doporučený pracovní odstup (ohnisková vzdálenost)	Katalogové číslo
+2	+ 0,40	40 %	1,4 x	250 mm	17-500-22-04
+3	+ 0,60	60 %	1,6 x	220 mm	17-500-23-04
+4	+ 0,80	80 %	1,8 x	200 mm	17-500-24-04

Nabíjecí stanice




17-500-17-04

Náhradní akumulátory (2 ks)

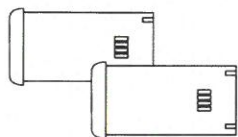

17-500-21-04

Transportní kufr

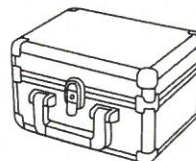


17-500-29-04

MedLED Chrome

příslušenství


Náhradní hlavové pásky

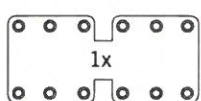


17-500-25-04
Neoprénový element pro Hardtop



17-500-26-04
Neoprénový suchý zip pro Hardtop

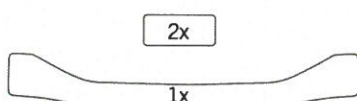


17-500-27-04
Měkký polštářek se suchým zipem pro Softtop

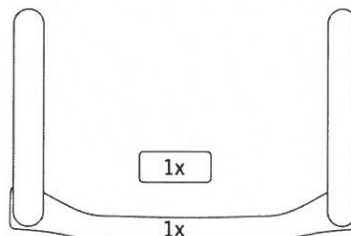


17-500-28-04
Měkký polštářek se suchým zipem pro Hardtop

GoPro adaptér

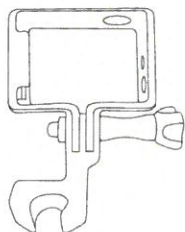


17-500-31-04

Náhradní čelenka komplet

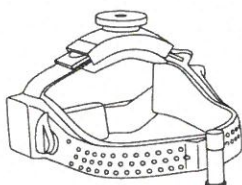

17-500-32-04
Náhradní čelenka komplet Hardtop

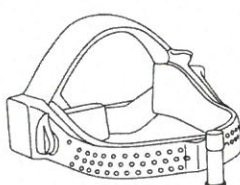

17-500-33-04
Náhradní čelenka komplet Softtop

Jantarový filtr (dentální)



17-500-34-04
MC3



17-500-35-04
MC6

Korpus svítidla



17-500-41-04
MC3





17-500-51-04
MC6



17-500-61-04
MC7 PRO


Síťový adaptér se zástrčkou

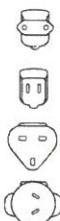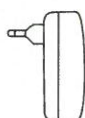

EU
US
UK
AU

Katalogové číslo

17-500-01-04
17-500-02-04
17-500-03-04
17-500-04-04

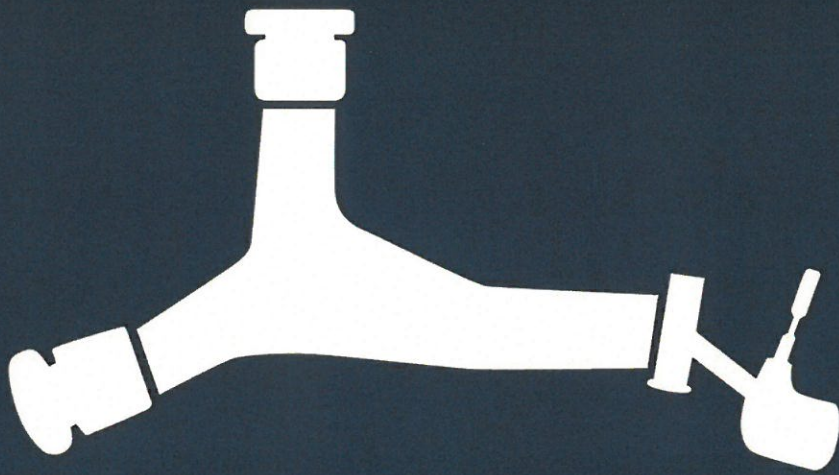

truly cordless™

KLS Martin Group

KLS Martin Australia Pty Ltd.

Sydney · Australien
Tel.: +61 2 9439 5316
australia@klsmartin.com

Martin Italia S.r.l.

Mailand · Italien
Tel. +39 039 605 67 31
italia@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG

Moskau · Russland
Tel. +7 499 792-76-19
russia@klsmartin.com

KLS Martin do Brasil Ltda.

São Paulo · Brasilien
Tel.: +55 11 3554 2299
brazil@klsmartin.com

Nippon Martin K.K.

Tokio · Japan
Tel. +81 3 3814 1431
nippon@klsmartin.com

KLS Martin LP

Jacksonville · Florida, USA
Tel. +1 904 641 77 46
usa@klsmartin.com

KLS Martin Medical (Shanghai) International Trading Co. Ltd.

Shanghai · China
Tel. +86 21 5820 6251
china@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Penang · Malaysia
Tel.: +604 505 7838
malaysia@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG

Dubai · Vereinigte Arabische Emirate
Tel. +971 4 454 16 55
middleeast@klsmartin.com

KLS Martin India Pvt Ltd.

Chennai · Indien
Tel. +91 44 66 442 300
india@klsmartin.com

Martin Nederland/Marned B.V.

Huizen · Niederlande
Tel. +31 35 523 45 38
nederland@klsmartin.com

KLS Martin UK Ltd.

London · Vereinigtes Königreich
Tel. +44 1189 000 570
uk@klsmartin.com



Fénix Brno, spol. s r. o.
sídlo společnosti
Vackova 79, 612 00 Brno
Česká republika
T 420 541 218 129 – 130
F 420 541 214 640
E fenix@fenix.cz
W www.fenix.cz

Fénix Brno, spol. s r. o.
pobočka Mladá Boleslav
Těšnovská 945, 293 06 Kosmonosy
Česká republika
T 420 326 724 114, 326 721 190
F 420 326 724 115
E fenixmb@fenix.cz
W www.fenix.cz



Fénix Bratislava, spol. s r. o.
Jána Zigmundíka 296/6, 922 03 Vrbové
Slovenská republika
T 421 033 77 91 238
F 421 033 77 91 238
M 421 0 903 20 55 71
E fenix@fenixgroup.sk
W www.fenixgroup.sk

