



# Technické údaje

LEO

## Zahrnuté modely

Tento návod k použití zahrnuje níže uvedené produktové řady lůžek LEO. Vysvětlení kódového označení je uvedeno níže:

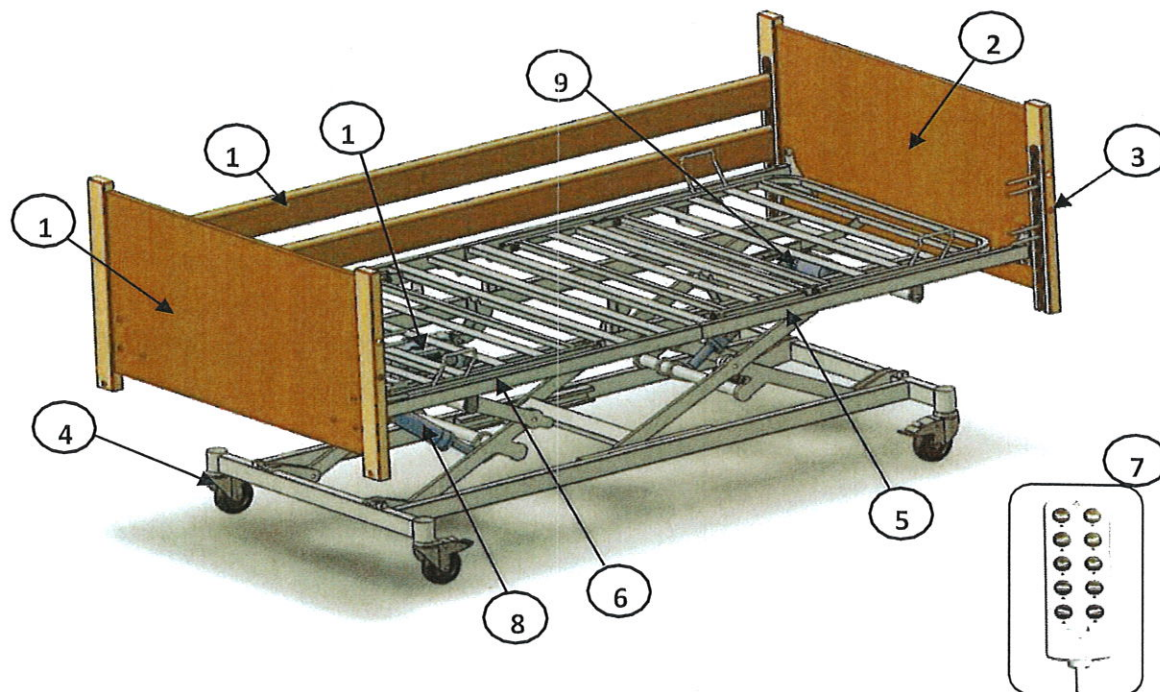
LEO/	LEO/3P/260
LEO/M/260	LEO/4P
LEO/W/	LEO/4P/260
LEO/W/260	LEO/MED/
LEO/3P	LEO/M/SIL
	LEO/M/SIL/260

LEO/	- lůžko LEO - rám v barvě Magnolia
/260/	- lůžko se sníženým roštem matrace
/3P/	- dvoudílné lůžko, rošt s kovovou sítí
/4P/	- čtyřdílné lůžko, rošt s kovovou sítí
/M/	- čtyřdílné lůžko, rošt s kovovými lamelami
/W/	- čtyřdílné lůžko, rošt s dřevěnými lamelami
/MED/	- nemocniční lůžko s vyjmutelným čelem, nárazníky, kovovými bočnicemi
	a konstrukcí ve stříbrné úpravě
/SIL/	- stříbrná úprava s ozdobnými lamelami a plastovými kolečky
/L01/	- varianta čela lůžka
/L02/	- varianta čela lůžka
/L03/	- varianta čela lůžka
/L04/	- varianta čela lůžka
/L05/	- varianta čela lůžka

# SOUČÁSTI

## Specifikace součástí

Obrázek ukazuje lůžko se 4 sekcemi s mechanismem nůžkového pantografu (nastavení sekce hlavy a nohou) a s elektricky ovládaným roštem matrace, které se skládá z těchto částí:



1	Přední část (čelo)	1 ks
2	Zadní část	1 ks
3	Pojistka bočnice	4 ks
4	Kolečko	4 ks
5	Sekce nohou	1 ks
6	Sekce zad	1 ks
7	Ovladač	1 ks
8	Elektromotor zdvihu	1 ks
9	Elektromotor sekce nohou	1 ks
10	Elektromotor sekce zad a řídicí jednotka	1 ks
12	Dřevěné bočnice	4 ks
13	Kovové bočnice (viz kapitola: „Sestavení kovových bočnic“)	2 ks

## 1.1 Volitelné příslušenství:

TB	Servírovací táč
LP	Hrazda s rukojetí (Max. nosnost 75kg)
LP/SIL	Hrazda s rukojetí ve stříbrné barvě
TP	Infuzní stojan
TR/EX/KIT	Prodloužení postele (+20 cm)*
TR/SR/EX	Dřevěný nástavec bočnic (zvýšení bočnic)
RL	Čtecí lampička
SPLIT	Dělené postranice

## ZÁRUKA

Záruční doba je 36 měsíců od data nákupu postele. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození a zásahy do konstrukce, elektromotorů a řídicí jednotky lůžka. Výrobce není zodpovědný za poškození v důsledku nedodržení předepsané údržby.

## Dostupnost náhradních dílů

Veškeré náhradní díly jsou dostupné minimálně 10 let od data prodeje.

# TECHNICKÉ ÚDAJE

		LEO/260	LEO/290
Celková délka		2080mm	2080mm
Celková šířka		1050mm	1050mm
Výška roštu		260-805mm	290-835mm
Prostor mezi podlahou a rámem		100mm	120mm
Délka roštu		2000mm	2000mm
Šířka roštu		900mm	900mm
Úhel sklonu zádové sekce		0 - 76°	0 - 76°
Úhel sklonu sekce nohou		0 - 34°	0 - 34°
Maximální výška sekce nohou		130mm	130mm
Úhel sklonu v Trendelenburgově pozici		0 – 15°	0 – 15°
Úhel sklonu v obrácené Trendel. pozici		0 - 18°	0 - 18°
Úhel sklonu sekce nohou / sekce sedu		0 - 21°	0 - 21°
Hmotnost	Rošt sekce nohou	19,2 kg	19,2kg
	Rošt sekce zad	19,2 kg	19,2kg
	Rošt sekce hlavy	8,8 kg	8,8kg
Celková hmotnost lůžka			134,7kg
Rozměry matrace	Délka	2000mm	2000mm
	Šířka	900mm	900mm
	Tloušťka		

## Maximální zatížení

	LEO 260	LEO 290
Maximální provozní zatížení	215 kg	215 kg
Maximální hmotnost pacienta	178 kg	178 kg
Maximální bezpečná zátěž hrazdy	75 kg	

## Elektrické součásti

Maximální doba provozu elektromotorů je 2 min., poté musí následovat alespoň 18 min. pauza.

Napětí	230 V $\pm$ 10%, 50 Hz
Provozní napětí	24 - 29 V
Maximální vstupní napětí	8 A
Ochrana proti el. šoku	Třída II
Třída ZP	B
Stupeň ochrany před vlhkostí	IPX4
Zdravotnický prostředek v souladu se směrnicí UE93/42/EEC	Třída I, článek 12
Provozní doba elektromotorů	2 min. provoz /18 minut v klidu
Hlučnost elektromotorů během provozu	52 dB
Teplota prostředí	Od +5 to +40 °C
Vlhkost	20% - 90% při 30 °C

# HYPER FOAM 2 Clinic

Systém léčby dekubitů

Antidekubitní matrace pro prevenci a léčbu proleženin až 4. stupně rizika.  
Konstrukce z trojitě vrstvy prémiové hyperelastické pěny Otto Bock.

## Klíčové vlastnosti:

- Dvouvrstvá hyperelastická pěna Otto Bock s podélnými a příčnými prořezy
- Unikátní ventilační systém pro ideální mikroklima
- Vyztužené boky pro lepší stabilitu matrace
- Voděodolný a prodyšný hygienický potah povrch
- Potah vybavený zipy
- Ultrazvukově svařované švy
- Záruka 5 let

## Potah PU-Tex

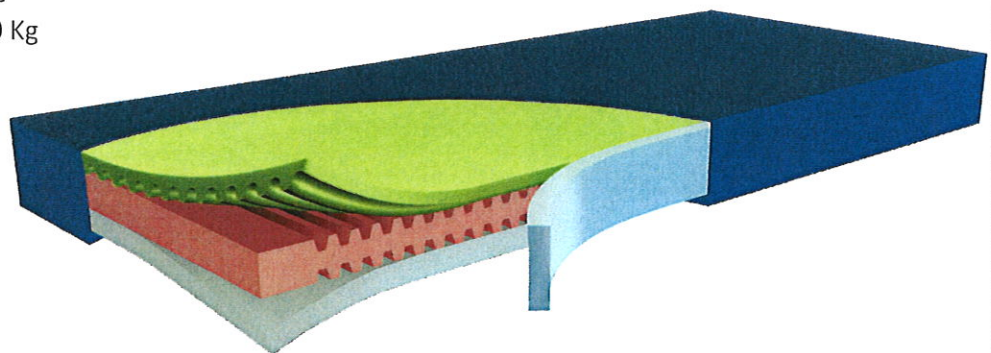
- Snímatelný
- Pratelý na 95 °C
- Dezinfikovatelný povrch odolný běžným

## Technické parametry:

- Prodyšná vysoceelastická pěna s otevřenými póry
- Sterilizovatelné v autoklávu
- Antibakteriální potah
- Paropropustný a voděodolný potah
- Rozložení tlaku pod hranici 18 mmHg
- Elastický potah ve čtyřech směrech pro snížený střižných sil
- Ohnivzdorné
- Nosnost 150 Kg

## Dostupné rozměry:


86 cm x 186 cm X 15 cm  
86 cm x 196 cm X 15 cm  
90 cm x 190 cm X 15 cm  
90 cm x 200 cm X 15 cm  
100 cm x 200 cm X 15 cm  
105 cm x 196 cm X 15 cm  
120 cm x 200 cm X 15 cm  
140 cm x 200 cm X 15 cm



**Stamed s.r.o.**  
Toužimská 1705/25  
Bolevec  
323 00 Plzeň

Tel.: 725 323 111  
Email: obchod@stamed.cz  
IČ: 29161941  
DIČ: CZ29161941

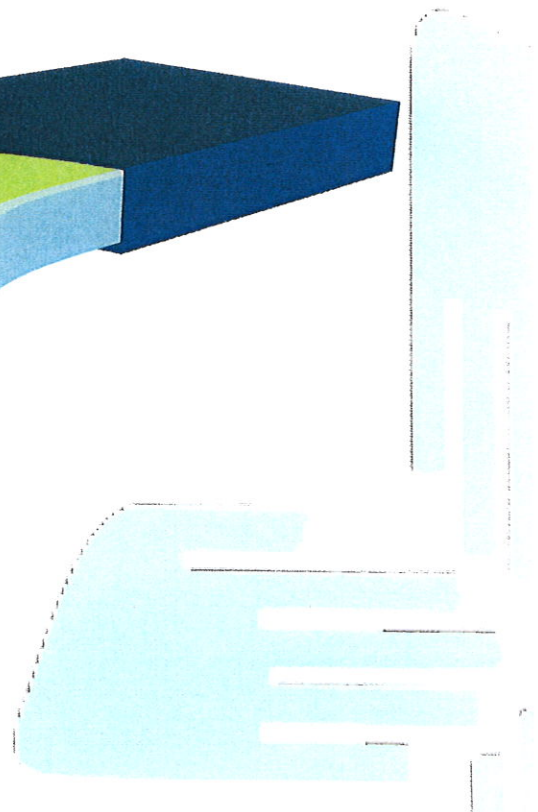Společnost je vedená u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 27962



# CuroCell A4 CX16

Plně automatická a flexibilní vzduchová  
antidekubitní matrace s nízkým profilem.



CuroCell® A4 CX16 with Top part Stone/bottom part CC

 care of sweden



# CuroCell® A4 CX16

CuroCell® A4 CX16 nabízí jednoduchost obsluhy a výjimečný pohodlí pro uživatele. Zároveň velmi účinně pomáhá předcházet a léčit dekubity až do kategorie 4 včetně dále neklasifikovaných tlakových poranění.

Matrace je navržena pro unikátní jednoduchost obsluhy a poskytuje funkce pro vynikající uživatelský komfort, snížení střížných sil a zlepšení mikroklimatu

Systém CuroCell® A4 CX16 obsahuje inteligentní, automatický kompresor s příjemným uživatelským rozhraním. Systém nastavení je zcela automatický a nevyžaduje žádné manuální nastavení. Systém identifikuje uživatele a automaticky nastaví všechny parametry pro optimalizaci tlaku přesně tak, jak je potřeba pro nejlepší výsledky léčby

Všechny matrace jsou dodávány včetně pružného, do 4 směrů roztažitelného potahu, který splňuje nejvyšší hygienické požadavky<sup>(3)</sup>, kvalitu a bezpečnost. Všechny potahy jsou moderních, materiálů a jsou paropropustné, což snižuje riziko nadměrné macerace pokožky.



## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Skladovací taška

## VELIKOSTI

80/85/90/100/105/120x200/210 x 16 cm

## REFERENCE

- (1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.
- (2) "EN ISO 11201 Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels", SP 2015.
- (3) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126, "performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents".
- (4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

Před použitím výrobku si vždy přečtěte uživatelský manuál.

Care of Sweden and CuroCell are trademarks of Care of Sweden AB.  
© Care of Sweden AB, 2018. All rights reserved. Last update: 2018-12-21.

HLAVNÍ FUNKCE MATRACE	INFORMACE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jednotlivě vyměnitelné komory</li> <li>• Pěnové jádro ze studené pěny</li> <li>• Funkce pro dolehčení pat</li> <li>• Multifunkční vnitřní potah</li> <li>• Vylepšená funkce CPR a transportní režim</li> <li>• Chytré uložení kabelů a hadiček</li> <li>• Unikátní design pro jednoduché ovládání</li> <li>• Vynikající krytí zipu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druh výrobku: Aktivní vzduchová matrace</li> <li>• Výška: 16 cm</li> <li>• Doporučená hmotnost uživatele: 0-200 kg</li> <li>• Vstupní napětí: 100-240 V / 50-60 Hz</li> <li>• Úroveň hluku pro kompresor, max: 20 dBA(2)</li> <li>• Záruka: 2 roky</li> <li>• Vyrobeno bez použití PVC</li> <li>• Pratelne na 95 °C, lze sušit v sušičce</li> <li>• Čištění potahu: Otírání mycím prostředkem a nebo dezinfekčním prostředkem</li> <li>• Odolné vůči chlorinům až do koncentrace (1%), pružný potah, svařované švy</li> </ul>
HLAVNÍ FUNKCE KOMPRESOR	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plně automatický režim kompresoru</li> <li>• Uživatelsky přívětivé ovládání</li> <li>• Zvukové a světelné alarmy</li> <li>• Tři programy: Pulzní režim, střídavý režim, CPL – konstantě nízký tlak</li> <li>• Max Firm – zvýšená tvrdost matrace pro poskytování péče personálem</li> <li>• Funkce Pack&amp;Go</li> <li>• Ultra tichý provoz bez vibrací</li> <li>• Provoz na nízké napětí (12 V)</li> <li>• Měkké závěsné háky s extra měkkou koncovkou</li> <li>• Řízení průtoku vzduchu, konstantní teplota, vynikající uživatelský komfort, energeticky úsporné</li> </ul>	



REHABED  
...our ideas your comfort

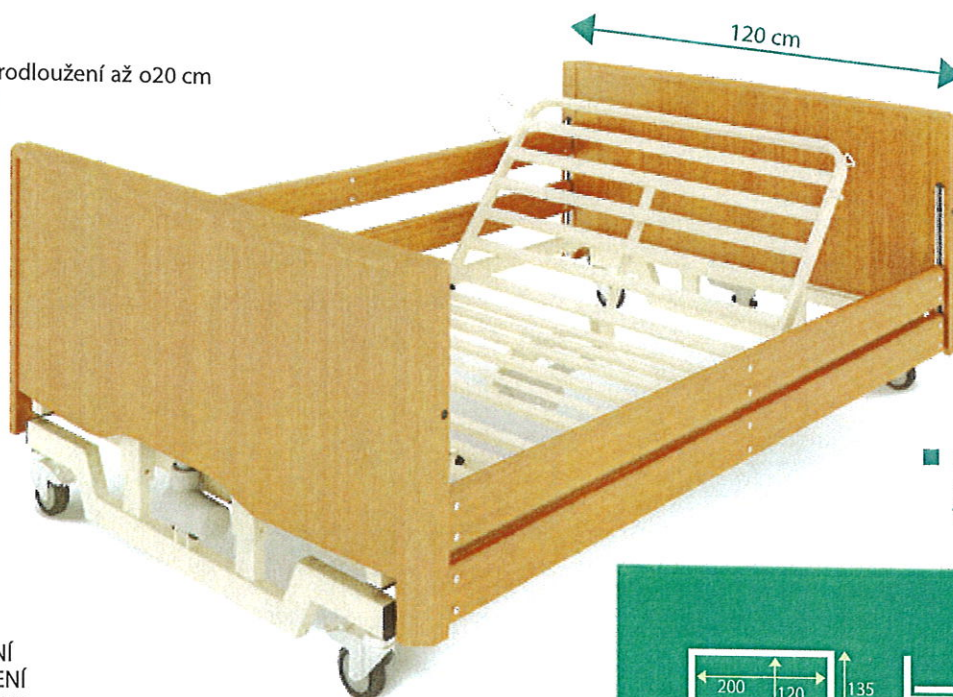


# BARIATRIC lux

Polohovatelné lůžko vhodné pro bariatrické uživatele. Se svou zvýšenou šířkou 120 cm nabízí příjemný uživatelský komfort. Se svou zesílenou konstrukcí a extra výkonnými motory nabízí nosnost až 385 kg.

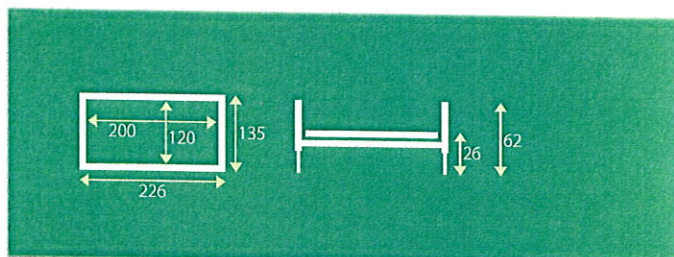
## ■ MAXIMÁLNÍ NOSNOST AŽ 368 Kg


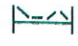




- Možnost prodloužení až o 20 cm  
TR/EX/KIT



- Možnost zvýšení postranic pomocí speciálního nástavce TR/SR/EX

- ROBUSTNÍ PŘEVEDENÍ POSTRANIC



-  NASTAVENÍ SKLONU ZÁDOVÉ SEKCE
-  NASTAVENÍ STEHENÍ A LÍTKOVÉ SEKCE
-  FUNKCE AUTO-CONTOUR
-  POLOHA TRENDELENBURG
-  POLOHA ANTITRENDELENBURG
-  NASTAVENÍ VÝŠKY 36-75 cm  
VARIANTA LOW 26-62 cm



KÓD VÝROBKU:

BAR/LUX – HEIGHT REGULATION: 36-75 cm

BAR/LOW/LUX – HEIGHT REGULATION: 26-62 cm