

SUPREME KVALITA V CELÉ ŘADĚ

SNADNO SE NAVLÉKAJÍ – patentovaná syntetická vnitřní vrstva
NAPROSTO PŘÁTELSKÉ K POKOŽCE – postprodukční proces Semperit
OPTIMÁLNÍ BEZPEČNOST – ideální hmatové vlastnosti



KVALITA V CELÉ ŘADĚ

Sempermed® Supreme znamená kvalitu a spolehlivost; ne bezdůvodně, je to jedna z nejčastěji používaných pudrovaných chirurgických rukavic v Evropě. Tato skutečnost zavazuje společnost Sempermed k neustálé optimalizaci výrobku a zlepšování kvality ve všech aspektech, aby byla zaručena vaše spokojenost - více než 95 let vyráběno v Rakousku.

SNADNO SE NASAZUJE

Tření je záležitost odporu



DOBŘE UDRŽOVANÉ TAJEMSTVÍ

Syntetická podšívka, díky které je Sempermed® Supreme tak snadné navlékat, je výsledkem mnoha let vývoje. Struktura podšívky je patentovaná.

PODŠÍVKOVÝ SYSTÉM

Proč lze Sempermed® Supreme tak snadno navléknout? Podšívka tvoří hladký povrch, ale má speciální síťovou strukturu. Tím se optimalizuje kontaktní povrch mezi filmem rukavice a pokožkou a tak se značně snižuje třecí odpor při nasazování rukavic. Struktura zanechává na pokožce příjemný sametový pocit.

INTRAOPERAČNÍ VÝMĚNA RUKAVIC

Podle studií vykazuje 24 až 37% chirurgických rukavic po použití perforace (World J. Surg., 1999). Při provádění dlouhého zákroku se chirurgické rukavice mohou zvlhčit, protože se ruce v rukavici neustále potí. Proto se doporučuje chirurgické rukavice pravidelně měnit. Speciální podšívka chirurgické rukavice Supreme zaručuje snadné intraoperační navlékání.

PRO DVOJITÉ NASAZENÍ




NOŠENÍ DVOJÍCH RUKAVIC

V této stále běžnější metodě určené k optimalizaci ochrany proti infekcím se nosí dva páry rukavic na sobě. Ve zvláště obtížných situacích nebo u vysoce rizikových pacientů poskytují dvě rukavice na sobě maximální bezpečnost. Sempermed® Supreme zaručuje snadné nasazení bez ztráty hmatové citlivosti.

IDEÁLNÍ DOTYKOVÉ VLASTNOSTI

Supreme výkon s taktem

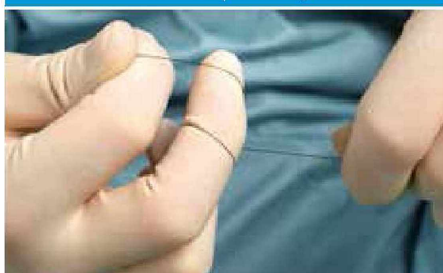

OPTIMÁLNÍ BEZPEČNOST

Chirurgické výkony vyžadují dovednosti vašich rukou, které zahrnují přesnou motoriku a optimální hmatovou citlivost. Rozhodujícím bezpečnostním faktorem k dosažení tohoto cíle je tloušťka rukavice.

JAKO DRUHÁ KŮŽE

Díky stálostí latexového filmu byla tloušťka stěny Sempermed® Supreme snížena na takovou úroveň, aby vaše hmatová citlivost nebyla téměř vůbec narušena a současně poskytovala maximální bezpečnost. Rukavice dodává pocit druhé kůže a při použití dvojích rukavic na sobě není přidáním druhého páru narušena vaše hmatová citlivost.

MAXIMÁLNÍ KOMFORT

Perfektně padnou



VAŠE RUKA JAKO MĚŘÍTKO VŠECH ČINNOSTÍ

Vaše ruka je jedinečná, stejně jako tvar Sempermed® Supreme. Plně anatomický tvar se zakřivenými prsty, vyvinutý speciálně pro požadavky operačního sálu, odpovídá přirozenému a uvolněnému držení rukou.

BEZPEČNÝ OKRAJ

Kuželová manžeta je anatomicky navržena tak, aby se vešla na zápěstí a rolovaný lem manžety poskytuje bezpečnou ochranu pro oděvy.

VYHNUTÍ SE ÚNAVĚ RUKOU

Tvar rukavice odpovídající uvolněnému držení ruky by měl zaručit, že budete moci pracovat se Sempermed® Supreme, aniž by došlo k únavě rukou a přitom zajistit, že budete moci vést své nástroje uvolněně, klidně a bezpečně, a to i při nejdelších operacích. K tomu přispívá také mimořádně široký hřbet rukavice.

PRO VÝHODY VAŠÍ KŮŽI



NAPROSTO PŘÁTELSKÉ K POKOŽCE– SEMPERIT POSTPRODUKČNÍ PROCES

Sempermed má speciálně vyvinutý, automatický dokončovací proces, ve kterém jsou rukavice mnohokrát intenzivně prány. Látky dráždící pokožku, které jsou výsledkem výrobního procesu a koncentrace přirozeného latexového proteinu, jsou tak sníženy na technicky nejvyšší úroveň.

sempermed®
supreme



sempermed® supreme

TYP	Sterilní chirurgické rukavice pro jednorázové použití, bez pudru, se syntetickou vrstvou		
MATERIÁL	Latex z přírodního kaučuku (NR)		
BARVA	Přírodně bílá		
TVAR RUKAVICE	Plně anatomické se srolovaným okrajem		
VELIKOST/CELKOVÁ DÉLKA dle EN 455-2	5 1/2, 6 a 6 1/2 7, 7 1/2 a 8 8 1/2 a 9	min. 270 mm min. 280 mm min. 285 mm	
TLOUŠŤKA STĚNY měřena jedna stěna v oblasti dlaně	0.19–0.23 mm		
NEPROPUSTNOST Těsnost překračující EN 455-1 (AQL 0.65 namísto AQL 1.5)	AQL 0.65		
SÍLA PŘETRŽENÍ překračující EN 455-2 (≥ 12 N namísto ≥ 9 N)	≥ 12 N		
SKLADOVATELNOST	3 roky v originální krabici, pokud je skladováno dle DIN 7716, ISO 2230		
STERILIZACE	Zářením STERILE R		
ZNAČENÍ	EN 1041, EN 455, EN 420, EN 374, ISO 15223		
ÚČEL jak je stanoveno ve směrnici MD 93/42/EHS jak je stanoveno v nařízení o OOP 89/686/EHS	Zdravotnický prostředek třídy IIa Jednorázová ochranná rukavice – OOP kategorie III (ochrana před chemickými látkami po omezenou dobu) ¹⁾		 
BALENÍ	Levá a pravá rukavice s rolovanou manžetou jsou zatavené ve zdravotnickém sáčku s peel otevíráním. V balení se sterilizačním indikátorem: 50 párů V přepravním kartonu se sterilizačním indikátorem: 300 párů		
ČÍSLA ARTIKLŮ	Vel. 5 1/2 16 650 Vel. 6 16 651 Vel. 6 1/2 16 652 Vel. 7 16 653	Vel. 7 1/2 16 654 Vel. 8 16 655 Vel. 8 1/2 16 656 Vel. 9 16 657	

KONTAKTUJE NÁS!

Semperit Investments Asia Pte Ltd
8 Jurong Town Hall Road,
#29-03 to 06 JTC Summit, Singapore 609434
E-Mail: sempermed@semperitgroup.com
www.sempermed.com

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m. b. H.
Division Sempermed
Austria · 1030 Vienna · Modecenterstrasse 22
Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630
E-Mail: sempermed@semperitgroup.com · www.sempermed.com

¹⁾Seznam chemických odolností Sempermed je k dispozici na www.sempermed.com/sempermed_informs/chemical_resistance

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Nejnovější informace o produktu jsou k dispozici na www.sempermed.com na kartě „Produkty“. Nedodržení těchto informací, zejména s ohledem na (chemickou) odolnost, četnost použití a snášenlivost rukavic, může mít za následek zranění osob nebo materiální poškození. Semperit nezodpovídá za nesprávné použití rukavic ani Semperit neodpovídá za nesprávné skladování a manipulaci. V případě poškození nebo neobvyklých známek opotřebení se rukavice nepoužívají. V případě pochybností je třeba před použitím vyhledat radu odborníka. Informace a klasifikace jsou aktuální ke dni zveřejnění. Technické údaje jsou průměrné hodnoty z výroby a mohou se v jednotlivých případech lišit. Toto vyloučení odpovědnosti podléhá chybám, tiskovým chybám a změnám. **UPOZORNĚNÍ:** Přírodní latex může vyvolat alergické reakce, včetně anafylaktického šoku. Semperit nenesie žádnou odpovědnost za alergické reakce.