

# Eleganza 1



skvělé řešení za dobrou cenu

# Eleganza 1





- Ergoframe® minimalizuje tlak v pánevní oblasti
- Snadná mobilizace
- Celá řada ovládacích prvků



Pacient

- Funkce Soft Drop
- Snadná hygiena lůžka
- Bezpečnostní výbava, například Extender nebo Protector



Personál

- Nízké náklady na pořízení i údržbu
- Univerzální lůžko za výhodnou cenu
- Ochrana proti přetížení



Management



# Ještě lepší péče

## KOMFORT PRO KAŽDÉHO

Lůžko je vhodné i pro hospitalizované s nadváhou nebo pro vyšší pacienty.

- Robustní konstrukce.
- Bezpečné zatížení 180–250 kg.
- Šířka ložné plochy 90 cm.
- Možnost prodloužení lůžka o 15 cm.
- Dělené plastové postranice s funkcí Soft Drop.



## OVLÁDÁNÍ NA DOSAH

Pacient má k dispozici hned několik snadno dostupných a jednoduše ovladatelných prvků.

- 1** Ruční ovladač  
K ovládání poloh lůžka, může být vybaven podsvícenou klávesnicí.
- 2** Satelitní ovládací panel  
Na ohebném rameni je snadno přístupný, tlačítka jsou reliéfní a dobře rozpoznatelná i pro pacienty s poruchou zraku.
- 3** Ovladače v postranicích  
Ovládají se jednoduše a jsou stále na dosah.





## ERGOFRAME® +16 cm

Při polohování zádového a stehenního dílu Ergoframe® minimalizuje tlak a třecí síly v pánevní oblasti pacienta.



## SNADNÁ MOBILIZACE

Ložná plocha je vybavena integrovaným madlem Mobilift®, které podporuje samostatnou mobilizaci pacienta.

- Respektuje různou výšku pacientů a lze jej nastavit do dvou výškových úrovní.
- Vždy nastaveno pro optimální vstávání z lůžka.




# Bezpečnost především

## BEZPEČNÉ POSTRANICE

Lůžko lze vybavit dělenými plastovými postranicemi s funkcí Soft Drop nebo jednoduchými  $\frac{3}{4}$  postranicemi. V každém případě postranice odpovídají platným normám a všechny mezery byly navrženy s ohledem na bezpečnost.

- Bezpečnost dělených plastových postranic je zaručena systémem dvojitého zajišťovacího mechanismu.
- Ovládání jednoduchých  $\frac{3}{4}$  postranic je poprvé umístěno ergonomicky v jejich horních částech.
- Postranice s funkcí Soft Drop se sklápějí pomocí plynové pružiny, takže pohyb je plynulý a měkký.

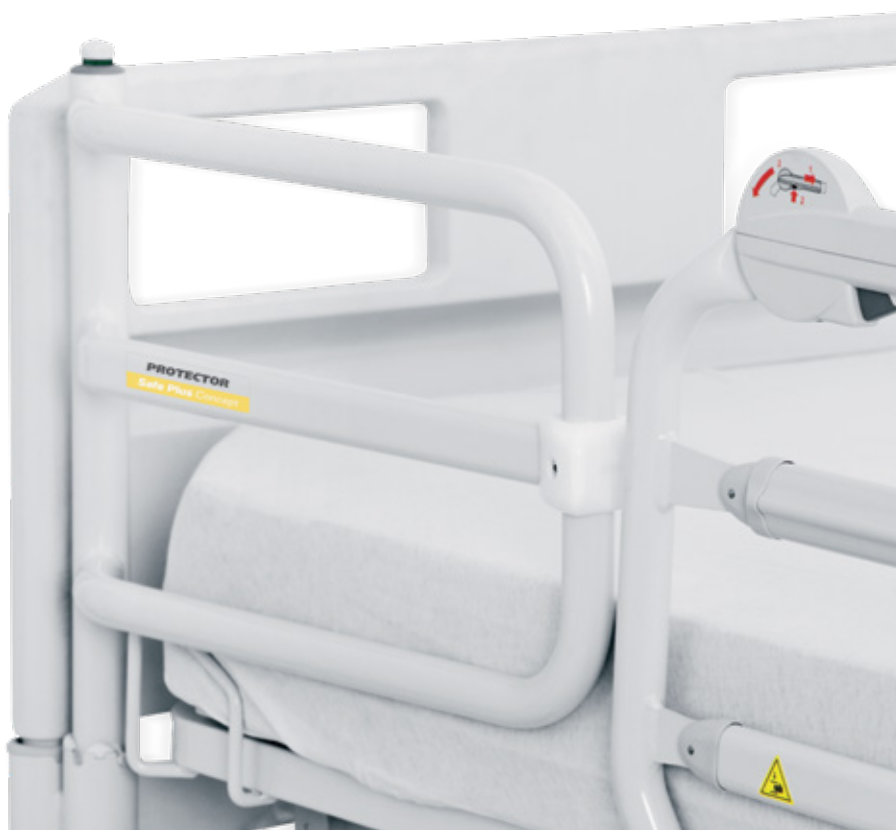

## ORIGINÁLNÍ PROTECTOR

Protector poskytuje ochranu po celé délce ložné plochy. Je umístěn v nožní části lůžka a navazuje na jednoduchou postranici jak svými rozměry, tak designem.







## LEPŠÍ OCHRANA

V některých případech je žádoucí poskytnout pacientovi vyšší míru ochrany. Snadno demontovatelný nástavec Extender zvýší postranici o 10 cm. Na lůžko tak lze umístit i vyšší typy aktivních matrací – až do výšky 26,5 cm.

## TLAČÍTKO GO

Zelené tlačítko GO chrání pacienta před nechtěným pohybem lůžka. Pomocí tlačítka GO jsou ovladače lůžka aktivovány po dobu tří minut od posledního stisknutí.



# Přívětivé pro personál



## 5. KOLEČKO

Aktivované 5. kolečko usnadňuje pohyb lůžka po dlouhých chodbách. Díky otáčivému bodu uprostřed lůžka je snadná i manipulace na malém prostoru, a to při použití menší fyzické síly.



## SESTERSKÝ OVLÁDACÍ PANEL

Díky praktickému kabelu lze s ovladačem snadno a flexibilně manipulovat v optimální poloze okolo lůžka.



## CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ PANEL

Panel k ovládání a deaktivaci funkcí je integrovaný do rámu v nožní části lůžka.



## NOŽNÍ OVLADAČE

Umožňují praktické a snadné nastavení výšky lůžka včetně vyšetřovací pozice. Jsou vybaveny mechanickou ochranou před náhodnou aktivací.



# Pro snadnou hygienu



## PLASTOVÁ LOŽNÁ PLOCHA

Ložná plocha je tvořena osmi samostatně odnímatelnými díly. Je vyrobena tak, aby čištění lůžka bylo jednoduché a rychlé.

- Každý díl váží jen 700 g, což práci velmi usnadňuje.
- Reliéfní piktogram pacienta pomáhá k určení správné polohy dílu.



## BEZESPÁROVÁ TECHNOLOGIE

Při výrobě jednotlivých dílů se používají nejmodernější bezespárové technologie, které minimalizují prostor pro nežádoucí infekce. Lůžko tedy splňuje nejpřísnější hygienické požadavky a je uživatelsky přátelské.



## JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE


Lůžko Eleganza 1 bylo pro snadnou čistitelnost od počátku navrhováno s cílem maximálně zjednodušit konstrukci i jednotlivé díly a plochy.

- Pro sklopení postranic je díky inovativnímu mechanismu zapotřebí jen minimální prostor vedle lůžka.

# Eleganza 1 Extra SAFE

## PÉČE A ABSOLUTNÍ BEZPEČNOST

Eleganza 1 Extra SAFE nabízí vysoký standard nemocničního lůžka. Díky úpravám jsou tato lůžka vhodná pro speciální oddělení, jako jsou například psychiatrie, vězeňské nemocnice nebo oddělení s mentálně nemocnými pacienty.

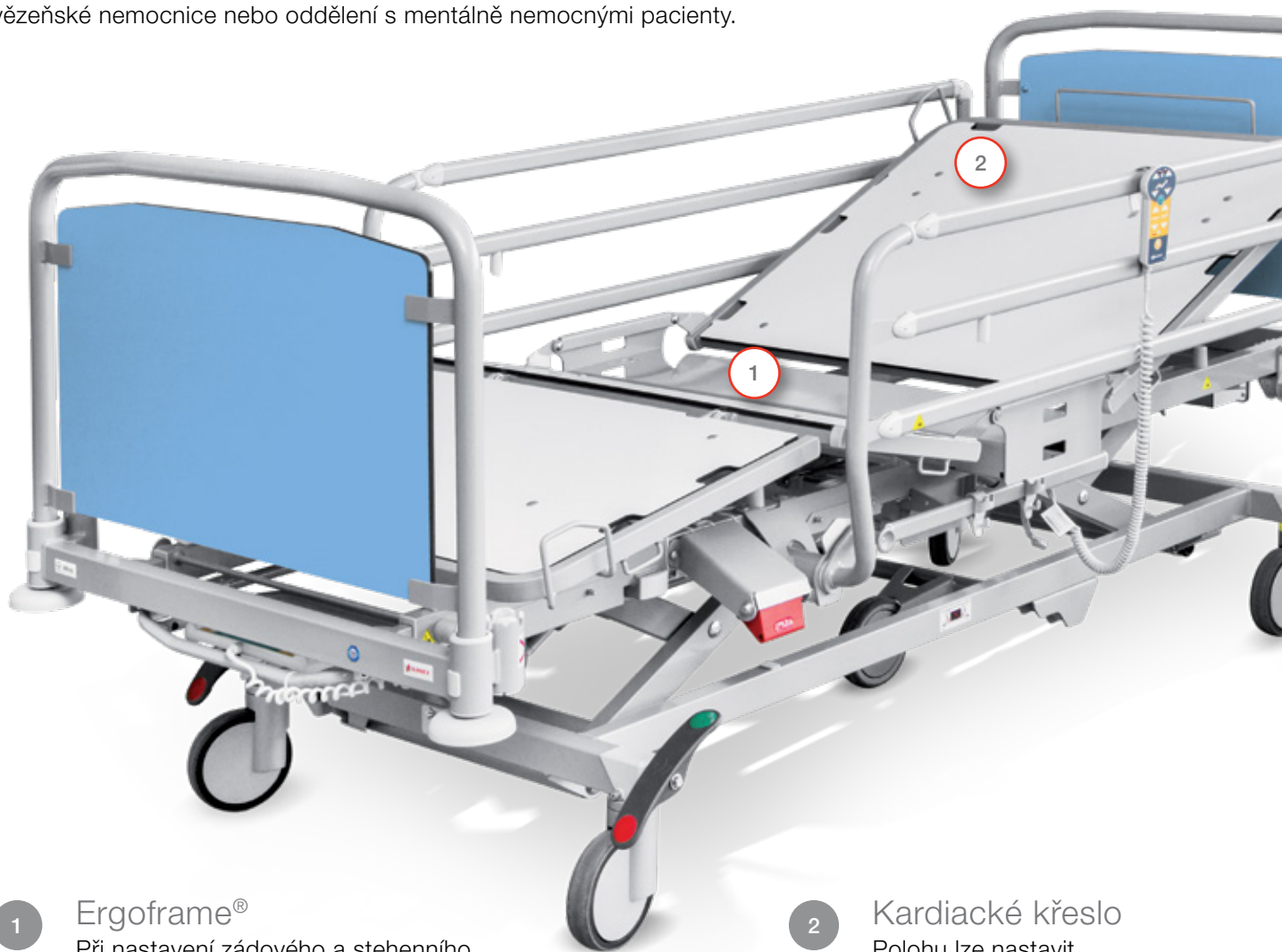

1

### Ergoframe®

Při nastavení zádového a stehenního dílu se díky Ergoframe® prodlouží ložná plocha o 16 cm.

2


### Kardiacké křeslo

Polohu lze nastavit stiskem jediného tlačítka.

### Základní vybavení lůžka Eleganza 1 Extra SAFE\*


Pevné kryty ložné plochy	Konektor Plug and Play pro patientský ovladač
Pevná trubková čela	Záložní baterie
Pevné výplně čel	Sesterský ovladač s tlačítky kardiackého křesla a TR/ATR náklonů
Zabudovaný sesterský panel v poličce na lůžkoviny	Ochrana přívodního kabelu v uzamykatelném boxu

\* oproti standardní verzi lůžka

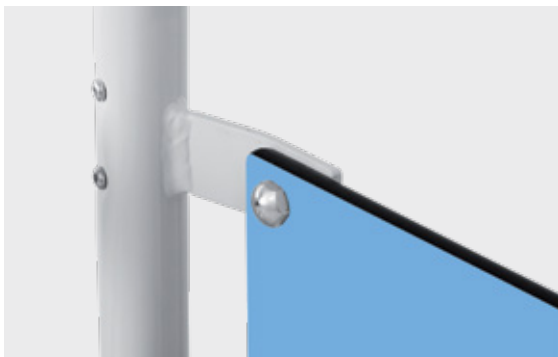

## PEVNÉ DÍLY

Čela lůžka i jejich výplně jsou uchyceny napevno a zafixovány jsou rovněž díly ložné plochy. Všechny drobnější součásti lůžka, jako například háčky na liště na příslušenství, jsou zajištěny.

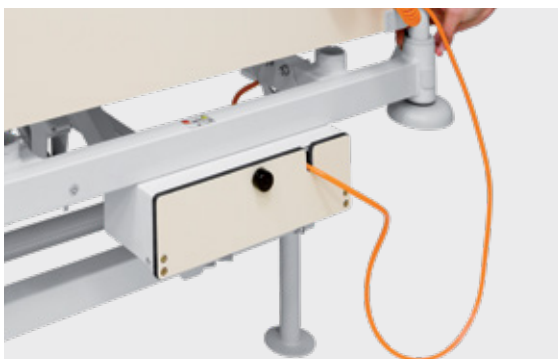

## OCHRANA KABELU

Přívodní kabel se nachází ve schránce se zámkem. Kabely jsou vedeny tak, aby neohrožovaly pacienta.



## KLÍČ SEGUFIX

Klíč Segufix je kompatibilní, obsluha nepotřebuje žádné další klíče.



## PEVNÁ VERZE

Lůžko ve verzi bez koleček lze upevnit k podlaze.



# Eleganza 1 LE

## EKONOMICKÁ VERZE

Konstrukce lůžka Eleganza 1 LE je shodná s klasickým modelem Eleganza 1: zdvih, maximální zatížení, podvozek včetně všech verzí koleček a brzd, ložná plocha i čela. Stejně tak lze volit mezi jednodílnými sklopnými postranicemi nebo dělenými plastovými postranicemi.

Řídicí jednotka lůžka je jednodušší.





Zjednodušená verze lůžka Eleganza 1 LE nabízí vysokou funkčnost za nižší cenu.

- Univerzální řídicí jednotka 100–240 V.
- Lůžko lze vybavit ručním ovladačem Plug and Play.
- Jedna páka mechanického nastavení CPR (možné navýšení na dvě páky).



## OVLÁDÁNÍ LŮŽKA

Lůžko Eleganza 1 LE je vybaveno jednodušší řídicí jednotkou, takže jej lze ovládat jediným ručním ovladačem. Ten umožňuje elektrické polohování a nastavení výšky.

- Mechanický zámek.
- 8 nebo 10 tlačítek (2 tlačítka pro náklon do polohy TR/ATR).



*Cenově nejdostupnější varianta elektrického lůžka bez náklonu.*

# Praktické detaily


1 Odnímatelná čela lůžka  
Ize připevnit k rámu ložné plochy  
jednoduchými excentrickými zámky.

2 Horizontální chrániče  
pro ochranu rohů lůžka.

3 Ložná plocha  
umožňuje snadné  
vyjmutí a čištění a je  
kompatibilní s matracemi  
šířky 86 i 90 cm.

4 Poličku  
na lůžkoviny  
je možné využít  
i k uložení  
sesterského  
panelu.

5 Mechanické  
CPR  
je alternativou  
k elektrickému CPR.

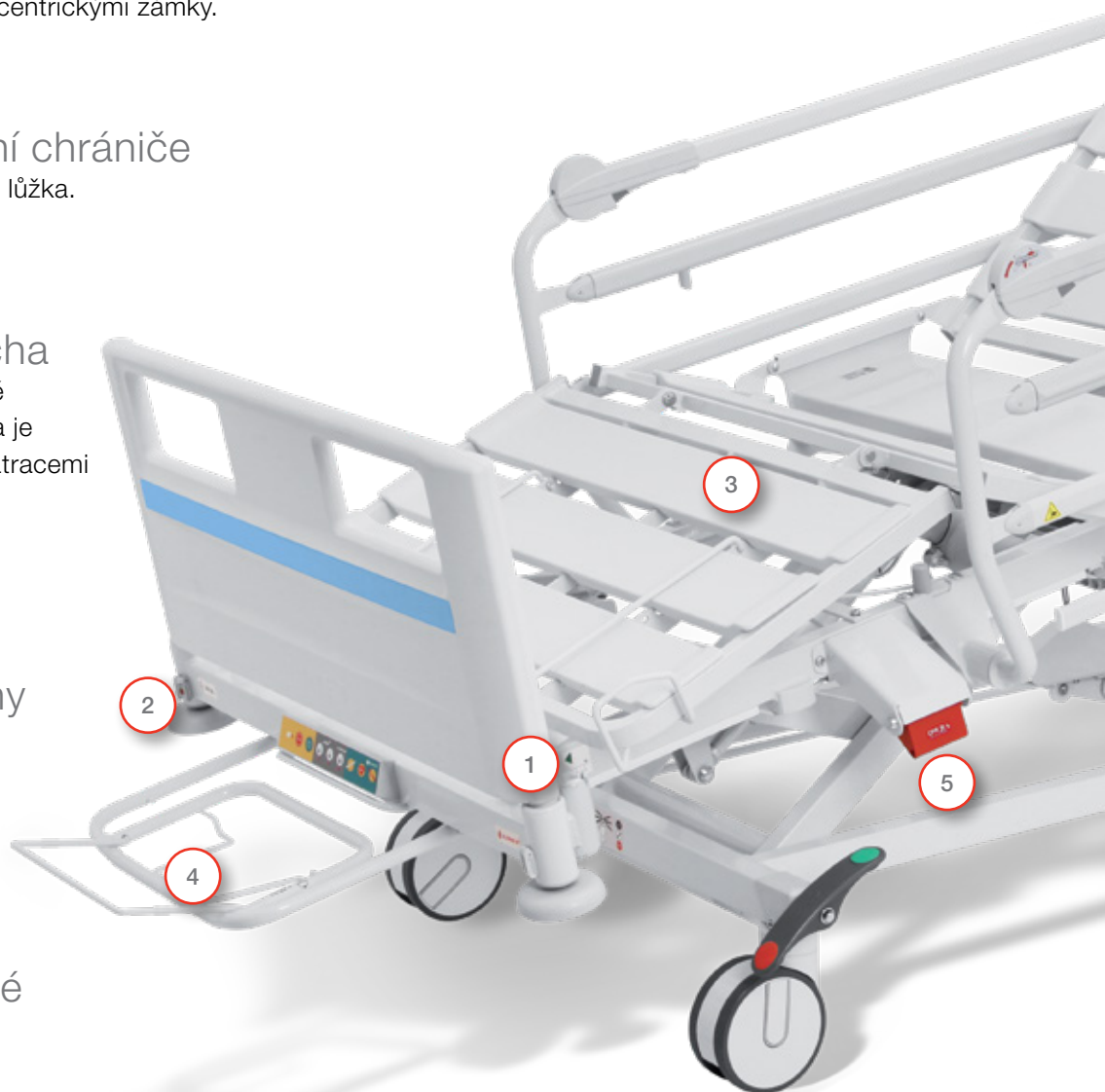





### Bezpečné pracovní zatížení

Kolečka		Brzdění	
Rozměry	Brzdění	Bez baterie	S baterií
125 mm	Samostatné brzdy	185 kg	
	Centrální brzda	200 kg	250 kg
150 mm	Centrální brzda		

### Technické údaje

	Kolečka	
	125 mm	150 mm
Vnější rozměry	218 × 99,5 cm	
Prodloužení lůžka	15 cm	
Ložná plocha	4dílná, elektricky nastavitelná	
Rozměry ložné plochy	200 × 90 × 14 cm	
Elektrické nastavení výšky	37–73,5 cm	39,5–76 cm
Elektricky polohovatelný zádový díl	0–70°	
Elektricky polohovatelný stehenní díl	0–35°	
TR/ATR	15°–15°	
Ergoframe®	10+6 cm	
Hmotnost lůžka (dle specifikace)	135 kg	
Norma	IEC: 60601-2-52	
Ochrana proti vniknutí vody a prachu	IPx4	
Ochrana před přetížením	Ano	
Podjezdnost pro server	16 cm	18,8 cm



# Eleganza 1

Pacient

- Ergoframe® napomáhá ke snížení tlaku v pánevní oblasti.
- Snadná mobilizace
- Celá řada ovládacích prvků



- Funkce Soft Drop
- Snadná hygiena lůžka
- Bezpečnostní výbava, například Extender nebo Protector



Personál

Management

- Nízké náklady na pořízení i údržbu
- Univerzální lůžko za výhodnou cenu
- Ochrana proti přetížení



  wissner-  
bossenhoff

**LINET**

Members of LINET Group

**LINET, spol. s r.o.**

Želevčice 5 | 274 01 Slaný | Česká republika

tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | e-mail: [info@linet.cz](mailto:info@linet.cz) | [www.linet.cz](http://www.linet.cz)



[www.linet.cz](http://www.linet.cz)