

Věc: nabídka

Číslo: N20240117-3

Zpracoval: Ing. Jiří Palbuchta

Tel: 723574234 | **Datum:** 04.09.2024

Klient:

SOŠ, SOU Horšovský Týn, p.o.
Littrowa 122
346 01 Horšovský Týn

Ing. Fousová Miluše, ředitelka školy
Email: fousovam@sos-souhtyn.cz
Tel.: 379 410 063; 602 457 421

Vážená paní ředitelko,

děkujeme Vám za Váš zájem o naše řešení a služby a na základě zjištění Vašich potřeb a Vám navrhujeme následující řešení, které vyřeší vaše potřeby týkající se mobility a překonávání vnější a vnitřní schodišťové bariéry ve Vašem bydlišti a dalších schodišťových bariér při návštěvě jiných budov, které nemají bezbariérový přístup.

Tímto řešením je „**Unikátní a jedinečný pásový schodolez LG 2004**“ s velice lehkým ovládáním a manipulací a neuvěřitelným dojezdem na trhu.

Unikátní Pásový schodolez LG 2004-150

Popis nabízeného řešení:

Pásový schodolez série LG2004 je navržen a vyroben na základě dlouhodobých zkušeností a zpětných vazeb od zákazníků. Díky svému provedení, designu a vlastnostem patří mezi nejžádanější schodolezy na světovém trhu. Navrhovaný inovovaný pásový schodolez LG2004 díky svým vlastnostem, parametrům a provedením je hvězdou mezi všemi pásovými konkurenčními schodolezy. Díky svému **jedinečnému technickému řešení** je velice jednoduše manipulovatelný a obsluhný.



Proč zvolit unikátní pásový schodolez LG2004:

- **Jednoduché otáčení o 360°** díky systému všech výsuvných koleček. **Díky výsuvným zadním kolečkům a předním výsuvným a otočným kolečkům** je s tímto schodolezem **nejjednodušší manipulace** na podestách a všude, kde je třeba zatočit. Se schodolezem můžete jen zatáčet s vyvinutím minima síly. Není třeba vyvinout fyzickou sílu a tlak při tlačení do řídítek, jak u konkurenčních schodolezů, kdy je u konkurenčních schodolezů když chci zatočit třeba zatlačit do řídítek a tím nadlehčit předek schodolezu.
- **Díky systému zvedacího podvozku není důležitá hmotnost schodolezu LG2004, které je i přesto nízká s celkovými 58kg.**
- **Neuvěřitelný dojezd 60 poschodí** (s klientem o hmotnosti 80kg)
- **Skládací horní a dolní konstrukce úchopových prvků na řídítkách** pro lepší transport a uskladnění.

- **Ovládací a aretační prvky jsou na řídítkách**, kdy díky těmto prvkům odpadá manipulace nohou či rukami na spodku schodolezu a tím je vše pro obsluhu jednodušší a pohodlnější.
- **Nastavitelná opěrka hlavy**.
- Speciální vroubkovaný pás určený pro všechny povrchy, díky němuž nedojde k poškrábání povrchu vaší podlahy.
- **Velká rychlost jízdy.**
- **Tichý chod.**
- **Zakrytování pohonu schodolezu včetně pásů** (díky tomuto řešení nemůže dojít k případnému namotání oblečení nebo dalších věcí klienta a tím k ohrožení klienta).
- **Bezpečnostní mechanické spuštění a vystupování v případě vybití baterie díky mechanickému klíči.**
- **Malé rozměry** (celková délka základny 98cm).
- **Velké množství příslušenství pro různé typy vozíků.**

Instruktažní video k tomuto schodolezu je možné shlédnout na našich stránkách: <http://www.solift.cz/pasovy-schodolez-lg-2004/>.

Způsob obsluhy:

Obsluha se schodolezem najede k mechanickému vozíku a nejprve zabrzdí samotná kola vozíku. Následně se najede pod vozík s klientem tak, aby obsluha mohla odjistit kormidlo (řídítka) schodolezu a zvednout do kolmé polohy vzhledem k podvozku schodolezu. Řídítka schodolezu se v tomto případě lehce dotýkají opěrek vozíku. Odjističení, zvednutí a zajištění řídítek schodolezu se děje pomocí ovládacích páček na řídítkách schodolezu, což je pro obsluhu velice snadné. Po tomto kroku dojde k odjističení a znovu zajištění aretačních kolíků za opěrky vozíku s klientem.

Tímto krokem je schodolez téměř připraven k použití. Ještě zajištění úchopový pás kolem klienta a nakonec provedeme naklopení řídítek schodolezu i s vozíkem směrem dozadu.

Takto připravený schodolez i s klientem je možné okamžitě začít používat.

Jednoduché zatažení a manipulace na podezděch se provádí stlačením tlačítka pro výsuv podvozku. Po vysunutí podvozku se jen otočí řídítka schodolezu směrem tam, kam je třeba zatočit a lehce zatlačíme do schodolezu a otočíme schodolez. Díky této lehké manipulaci zvládne tuto obsluhu téměř každý.

V případě zastavení schodolezu na schodech schodolez zůstane automaticky zablokován, takže se schodolez nemůže samovolně rozjet. Znovu se schodolez spustí zmáčknutím tlačítka dopředu nebo dozadu.

V případě, že není třeba schodolez používat (přestože má baterii s velkou kapacitou), je lepší, když se bude schodolez pravidelně nabíjet. Součástí schodolezu je nabíječka, která má dlouhý kabel, takže schodolez nemusí přímo stát u zásuvky el. energie.

Pro případ přepravy je možné schodolez pohodlně rozložit na 2 části a umístit ho do auta, tak, že zabírá malý prostor. Hmotnost základny schodolezu je 46kg a hmotnost řídítek je 12kg.

Cenová nabídka pro Vás:

Množství (ks)	Zboží	Jedn. cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
1	Unikátní pásový schodolez LG2004, 130kg, baterie, nabíječka, klika, návod, <u>mechanický vozík pro přepravu žáků</u>	80 350,-Kč	12%	89 992,-Kč


Celkové ceny obsahují: DPH, dopravu, zaškolení

Platební podmínky: dle dohody

Termín dodání: nyní 2ks skladem (jinak nejpozději do cca 14dnů)

Záruka: 3 roky od dodání zboží, 6 měsíců na baterii

Platnost nabídky: do 30.10.2024

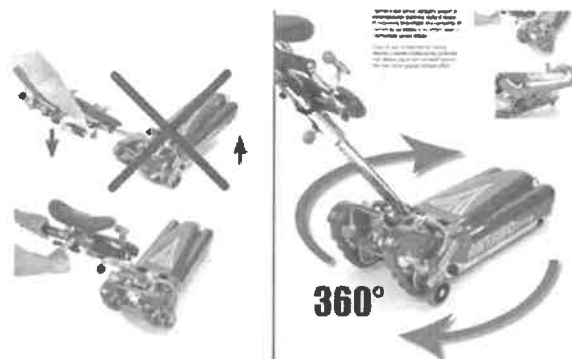

S přátelským pozdravem

Ing. Jiří Palbuchta

Technické parametry:

- Nosnost 130 kg / 150 kg
- Operativní dosah: 60 poschodí (s 80 kg uživatelem)
- Dosah po signalizaci vybití baterie: 4 poschodí
- Minimální šířka schodiště: 75 cm
- Podesta při „L“ schodišti: 98 x 98 cm
- Podesta při „U“ schodišti: 98 x 170 cm
- Max. sklon: 70% = 35°
- Rychlost jízdy: 15 schodů / min.
- Celková hmotnost: cca 58 kg
- Hmotnost sloupku řízení: 12 kg
- Hmotnost nabíječky: 0,70 kg
- Napájení nabíječky: 230 V
- Výkon motoru: 300 W
- Příkon nabíječky: 80 W

